



INSTRUCTIONS POUR LE STYLO PRÉREMPLI ACTEMRA®

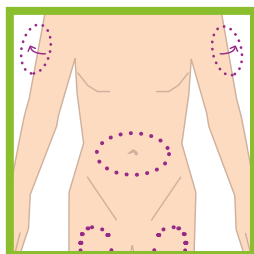

1

Préparation du site d'injection


- Les sites d'injection recommandés sont le milieu des **cuisses** ainsi que le **bas-ventre** sous le nombril, en évitant un périmètre de 5 cm autour du nombril. Lors d'une injection par le personnel médical, également le côté extérieur du haut du bras.
- Ne jamais injecter dans une cicatrice, un grain de beauté ou dans toute autre zone sensible de la peau.
- Désinfectez le site d'injection avec un tampon d'alcool.
- Pour chaque injection, choisissez un nouvel endroit du corps situé à au moins 2,5 cm de l'emplacement de l'injection précédente.

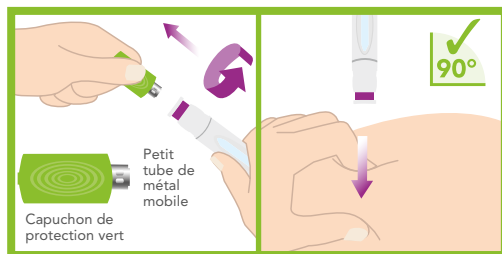

2

Préparation du stylo prérempli





- Enlevez le stylo prérempli de la boîte et **laissez-le à température ambiante (15 °C à 25 °C) pendant 45 minutes.**
- Vérifiez la date d'expiration sur l'emballage et le stylo prérempli.
- Retirez le capuchon de protection et utilisez le stylo **dans les 3 minutes** qui suivent.
- Ne touchez pas la partie avant du stylo, sous la fenêtre de contrôle.
- Formez un **pli cutané souple** au niveau du site d'injection désinfecté afin de stabiliser le site d'injection.

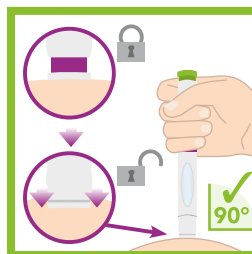

3

Injection du médicament


- **Appuyez le stylo prérempli** à un **angle de 90°** sur le pli cutané jusqu'à ce que la protection de l'aiguille ne soit plus visible.
- **Appuyez sur le bouton d'activation vert et maintenez-le enfoncé** jusqu'à ce que l'indicateur violet remplisse complètement la fenêtre de contrôle (env. 10 secondes). Un clic indique le début de l'injection.
- **Appuyez continuellement le bouton d'activation et ne le lâcher que quand l'indicateur violet dans la fenêtre de contrôle cesse de bouger.**
- Retirez le **stylo prérempli** de la peau en formant un **angle de 90°.**

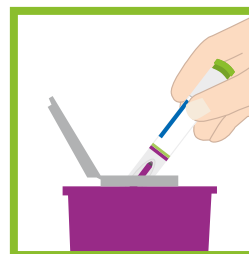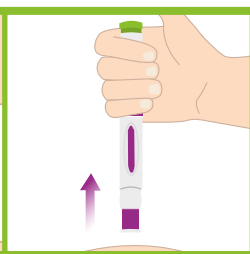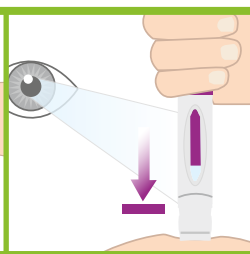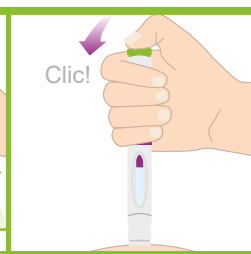

4

Élimination du stylo prérempli

- Éliminez le stylo prérempli usagé et le capuchon de protection dans un contenant pour seringues prévu à cet effet.

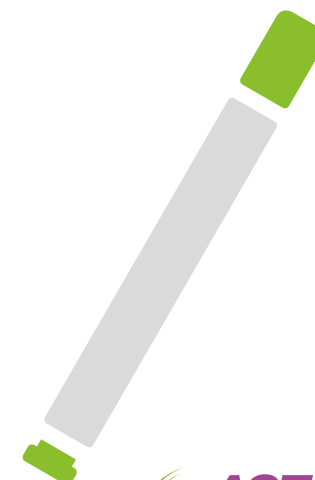


 **ACTEMRA®**
tocilizumab

BOUTON D'ACTIVATION

FENÊTRE DE CONTRÔLE 360°

Appuyez sur le bouton d'activation et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'indicateur violet s'arrête de bouger.

L'injection est terminée lorsque la fenêtre de visualisation à 360° est complètement remplie de l'indicateur violet (après environ 10 secondes).

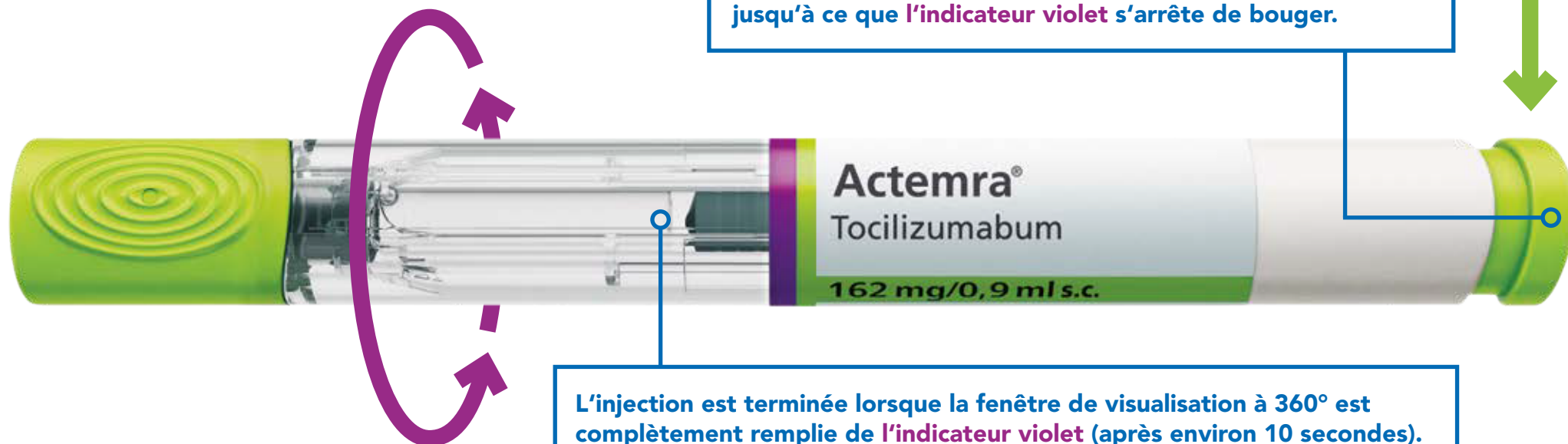

Vous trouverez des informations détaillées dans la notice d'emballage de votre stylo prérempli Actemra® ou dans les informations publiées pour les patients d'Actemra® (tocilizumab) sur www.swissmedicinfo.ch.



Roche Pharma (Suisse) SA
Grenzacherstrasse 124
4058 Bâle

 **ACTEMRA®**
tocilizumab